










MASQUE FFP2 NRD SACHET TAILLE 1 STANDARD



Nom du produit	Masque FFP2 NRD Sachet - Taille 1 Standard
Référence	CA1120_C
Description	Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP2 NR conçu pour protéger des particules solides et liquides. Prévention contre les maladies infectieuses à risque (Selon les recommandations nationales en vigueur). Soudure par ultrasons. 2 élastiques de maintien souples et doux Durée d'utilisation : 8h maximum (en continu). DLUO : 7 ans
Données Tests	<p><u>Pénétration huile de paraffine :</u> niveau exigé = <6% après 120mg d'exposition – Moyenne : 1,54 %</p> <p><u>Pénétration au NaCl :</u> niveau exigé = <6% après 120mg d'exposition – Moyenne = 0,36 %</p> <p><u>Fuites Faciales:</u> niveau exigé = 46 résultats <11% 8 moyennes sur 10 <8% - Valeur Maximale = conforme</p> <p><u>Résistance Respiratoire inhalation 30 l/min:</u> niveau exigé = <= 0,7 mbar – Moyenne = 0,24 mbar</p> <p><u>Résistance Respiratoire inhalation 95 l/min:</u> niveau exigé = <= 2,4 mbar – Moyenne = 0,84 mbar</p> <p><u>Résistance Respiratoire inhalation 160 l/min:</u> niveau exigé = <= 3 mbar – Moyenne = 1,16 mbar</p> <p>Surveillance annuelle selon le module B du Reg (UE) 2016/425 effectuée par l'APAVE</p>
Composition	Face externe-interne : Spunbond Polypropylène Filtre : Meltblown polypropylène - sans fibre de verre
Dimension (en cm)	23 x 14,5 x 10 (+/- 5 mm)
Origine	Fabrication FRANCE 
Informations Complémentaires	<p>Conforme au règlement 2016/425 Conforme à la norme EN149: 2001+A1:2009</p> <p>    </p>
Conditionnement	Carton de 100 masques (4 distributeurs de 25 masques)
Nbre de cartons/Pal.	104 cartons soit 10 400pièces
Stockage et conservation	Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre 5° C et 40° C  <80%   40°C 5°C


Rev1 10/09/2022

Protocole de pose des masques FFP1 – FFP2 – FFP3 :


MISE EN PLACE DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES (FFP1 – FFP2 – FFP3)



1
Séparer les bords du masque afin de l'ouvrir complètement.

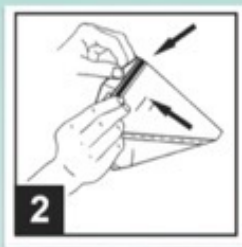

2
Plier la barrette nasale afin de maintenir le masque respiratoire ouvert.

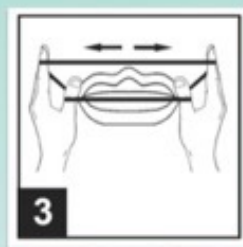

3
Identifier chacun des liens élastiques avec les index et les pouces.



4
Caler le masque formé en creux sous le menton et passer les élastiques au-dessus de la tête en les tenant avec le pouce et l'index.



5
Relâcher l'élastique inférieur et le positionner au niveau de la haute nuque



6
Positionner le 2ème élastique au niveau du sommet du crâne.



7
Ajuster la barrette nasale en appuyant bien au niveau des ailes du nez avec les doigts.



8
Pour une étanchéité parfaite du masque, s'assurer qu'il épouse bien la forme du visage. Inspirer lentement, le masque doit se plaquer sur le visage. Si une fuite est présente, réajuster et renouveler la vérification.

Précautions d'utilisation:

Avant l'utilisation du masque, consulter la notice

Avant la pose du masque, veuillez vous désinfecter les mains.

Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché.

Le masque doit être remplacé à chaque changement d'activité.

Le masque doit être jeté dans la filière des déchets adaptée, dès qu'il est mouillé ou souillé.

Désinfection hygiénique des mains après le retrait du masque.

Comment vérifier le bon ajustement d'un appareil de protection respiratoire (FFP):

L'essai le plus simple est appelé « fit check ». Son principe est le suivant :

- mettre le masque,
- obturer brièvement le filtre ou la surface filtrante avec les mains et si nécessaire avec une feuille de plastique,
- inhaler et vérifier que le masque tend à se plaquer sur le visage ; s'il est encore possible d'inhaler, c'est que le masque fuit au niveau du joint facial (voir fiche technique page suivante) .

L'ajustement d'un masque peut être aussi réalisé par un « fit test qualitatif ». Ce test nécessite l'utilisation d'un kit spécifique (« Fit Test ») qui vous permet de vérifier si le masque testé est bien mis en place, à votre taille et adapté à la forme de votre visage.

Il faut souligner que l'étanchéité d'un masque peut être considérablement réduite par une barbe (même naissante).

Avant d'utiliser un Kit Fit Test, nous vous conseillons de faire le test dit de « Fit Check » décrit ci-dessous.

Exercice de vérification de pose d'un masque respiratoire:

Exercice 1 : respiration normale en restant immobile

Exercice 2 : respiration profonde en restant immobile

Exercice 3 : respiration normale en tournant la tête d'un côté et de l'autre

Exercice 4 : respiration normale en bougeant la tête de bas en haut

Exercice 5 : parler à voix haute

Exercice 6 : grimace

Exercice 7 : respiration normale en se penchant pour toucher ses orteils,

Exercice 8 : respiration normale en restant immobile.

PORTER
UN MASQUE
NE SERT
À RIEN.*



* SAUF S'IL EST BIEN AJUSTÉ.